

1 CATEGORIA

Irrigador oral – Dispositivos de higiene

2 DESCRIÇÃO

O irrigador oral Sowash é um dispositivo destinado à higiene pessoal que se liga diretamente à torneira, e não utiliza qualquer fonte de energia.

3 COMPOSIÇÃO




Cada dispositivo contém
1 sistema Sowash
1 jato Sowash
1 adaptador de torneira de enrosque externo
1 adaptador de torneira de enrosque interno
1 vedante de borracha
1 livro de instruções em Português
Garantia 3 anos

4 TIPO DE UTILIZAÇÃO

O jato de irrigação oral de Sowash é indicado para todo o tipo de higiene oral, interdental, de aparelhos ou implantes dentários. Eficaz para a massagem gengival.

5 INSTALAÇÃO

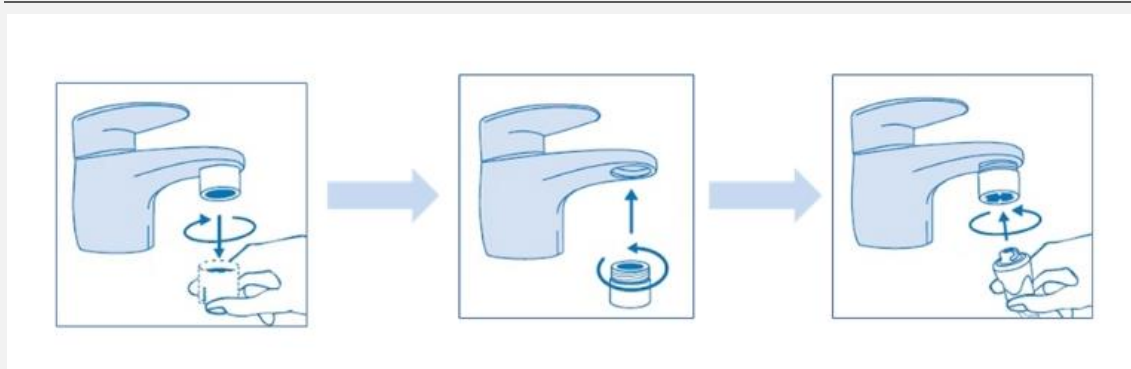

1 – Retirar o filtro da torneira e substituir pelo filtro adaptador de Sowash.

2 – Apertar o filtro adaptador Sowash e deixar definitivamente na torneira

Em caso de dificuldade de desapertar o filtro da torneira auxilie com uma chave própria para o efeito.

6 INDICAÇÕES

O adaptador de torneira Sowash está de acordo com a norma CEN EN 246 o que permite a adaptação a todas as torneiras domésticas. A utilização de Sowash não necessita de supervisão especial mesmo para ser utilizado por crianças. Deve ser utilizado com água tépida. O irrigador oral Sowash não necessita de manutenção ou limpeza especial.

7 GRUPO RESTRITOS

Não há grupos restritos à utilização do irrigador oral Sowash. Aconselha-se uma utilização controlada após cirurgias ou em zonas com doenças crónicas e mal cicatrizadas.

8 EFEITOS

A higiene oral com auxílio da irrigação oral reforça a saúde de toda a boca. Remove detritos e resíduos dos alimentos mesmo nas zonas mais difíceis onde as escovas e fios dentários não chegam, como o maxilar ou entre dentes com espaço limitado. Evita o sangramento gengival.

9 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

O utilizador deve assegurar-se que o dispositivo Sowash está fixo à torneira antes de cada utilização. O fabrico de Sowash é considerado de baixa densidade e não causa impacto no meio ambiente. Depois de utilizadas as embalagens devem ser depositadas no ecoponto. Todos os materiais são 100% recicláveis.

10 APRESENTAÇÃO

Cada embalagem do irrigador oral Sowash está dotada de todos os acessórios e instruções para utilização doméstica.

11 INFORMAÇÃO DE FABRICO

Sistema patenteado. Fabricado em Italia sob licença de Water Powered.

Todo o conteúdo deste documento é confidencial, e a sua divulgação ou partilha não autorizada considera-se uma violação punível por Lei. As informações e menções são da responsabilidade das entidades identificadas.

A restante página foi deixada em branco propositadamente