

TEST DE 1 DROGA AMP FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar Anfetaminas (AMP) en una muestra de orina.

Tiene un periodo de detección desde las 1 día hasta las 3 días.

 Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Anfetaminas (AMP)	1 día hasta 3 días	500 ng/ml

Los resultados son interpretados visualmente en función de la aparición de bandas en la ventana de prueba, que indican la presencia o ausencia de las drogas en cuestión. Este test es fácil de usar y ofrece resultados confiables en pocos minutos.


NO manipule la muestra de orina después de su recolección para evitar contaminaciones. Siga las instrucciones del dispositivo, diseñado para minimizar el contacto y preservar la prueba.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

NEGATIVO: Aparecen dos líneas de color, una en la región de control (C) y otra en la región del test (T). Este resultado indica que la concentración de la droga está por debajo del nivel detectable del corte para la droga de que se trate.

NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

INVÁLIDO: No aparece la línea de color en la región de control (C). Esto puede deberse a un volumen insuficiente de muestra o un procedimiento incorrecto. Revisa el procedimiento y repite el test.

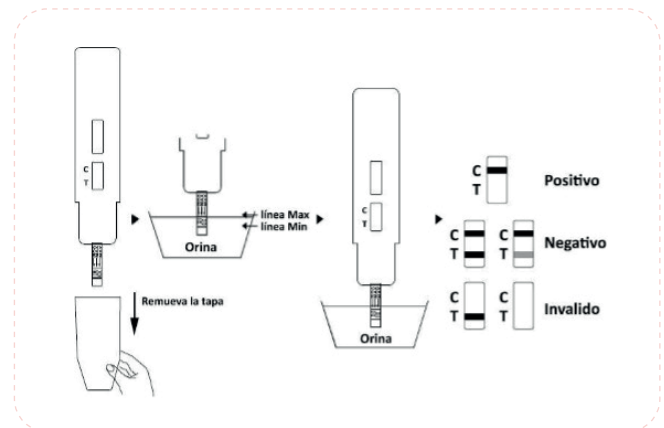

PERMITIR QUE EL TEST CARD, Y/O LOS CONTROLES ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) ANTES DE REALIZAR EL TEST

POSITIVO: Aparece una línea de color en la región de Control (C), pero no aparece línea de color en la región del test (T). Este resultado debe considerarse positivo.



VISITA NUESTRA WEB Y REVISANUESTROS PRODUCTOS