

BOQUILLAS DESECHABLES MARS-SALLITE

Boquillas Alcotest

Diseñada para ser utilizada con dispositivos Mars-Sallite u otros modelos compatibles. Se adapta para jornadas de testeo masivo en empresas, instituciones y campañas preventivas.

Características y beneficios

- Diseño estándar para lectura efectiva y segura.
- Asegura condiciones de higiene en test masivos.
- Fabricación en plástico no tóxico, descartable.
- Fácil manipulación: se inserta con un solo movimiento.
- Previene riesgos de contagio y errores en la toma de muestra.

COMPATIBILIDAD:

Equipos multiprueba y kits rápidos de saliva:

Alcotest AL8800 BT



Alcotest AL9010



Alcotest Mars



DIMENSIONES APROXIMADAS:

- 1,5 cm x 3 cm (Ancho x Alto)
- Diámetro superior: 1 cm
- Diámetro inferior: 0,7 cm

MODO DE USO

ABRIR EMPAQUE INDIVIDUAL

Retire la boquilla nueva desde su envase individual sin tocar el extremo que irá en contacto con el usuario.

INSERTAR EN EL DISPOSITIVO

Inserte firmemente la boquilla en la parte superior o lateral del alcotest.

REALIZAR LA PRUEBA DE ALIENTO


Pida al usuario soplar directamente en la boquilla hasta que el dispositivo indique que la muestra fue tomada.

DESECHAR LA BOQUILLA USADA

Deseche la boquilla en un contenedor apropiado, preferentemente en un punto de reciclaje si corresponde.

MATERIAL:

Polipropileno con válvula de seguridad unidireccional.

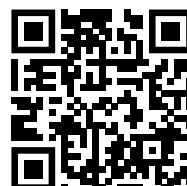

VISITA NUESTRA WEB Y REVISA
NUESTROS PRODUCTOS