

SIMULADOR DE PHANTOM DE PUNCION INNHEALTH


Descripción general:

El simulador Phantom de Punción Innhealth es una herramienta diseñada para el entrenamiento en técnicas de punción venosa guiadas por ecografía. Consta de dos vasos simulados incorporados en un bloque de material realista, ideal para prácticas clínicas, académicas y de validación de habilidades.



SMC-945

SIMULADOR DE PHANTOM DE PUNCION INNHEALTH

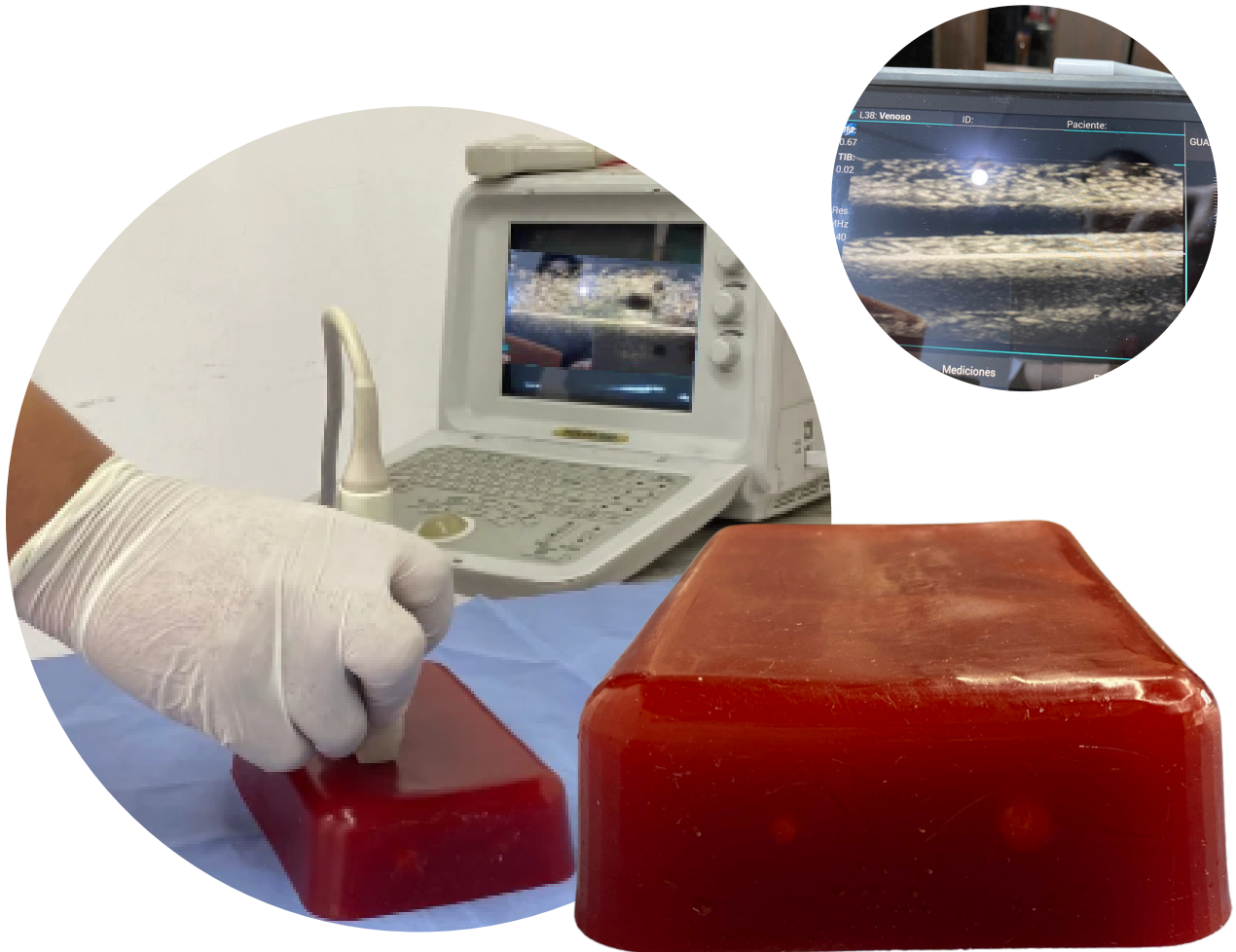


Características:

- Dimensiones: 15 x 10 x 4 cm
- Profundidad de vasos: 2 cm
- Calibres de los vasos simulados: Vaso 1 ($\frac{1}{4}$ "), Vaso 2 ($\frac{1}{8}$ ")
- Color: Rojo
- Material: tejido blando
- Compatibilidad: Uso con ecógrafos de entrenamiento

SIMULADOR DE PHANTOM DE PUNCION INNHEALTH

Funciones principales:

- Simulación de vasos venosos para práctica de punción guiada por ecografía.
- Entrenamiento en identificación y abordaje de estructuras vasculares bajo ecografía.
- Permite uso repetitivo con agujas o catéteres del calibre adecuado.
- Compatible con distintos equipos de ultrasonido de entrenamiento.

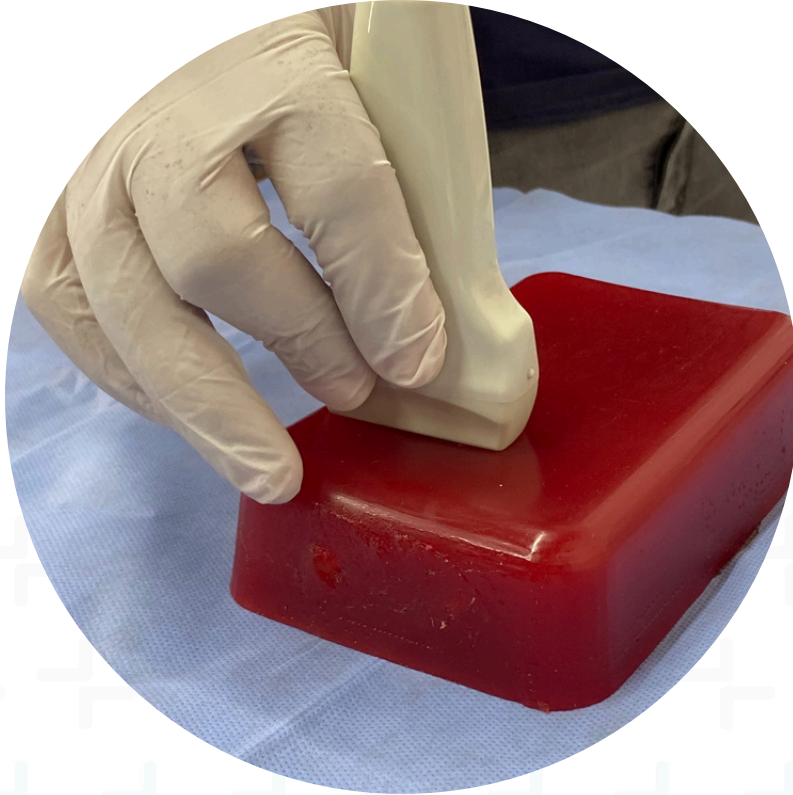

SIMULADOR DE PHANTOM DE PUNCION INNHEALTH



Cuidados y limpieza:

- No exponer a fuentes de calor directo o temperaturas superiores a 35 °C.
- No perforar áreas distintas a los vasos simulados para conservar la durabilidad.
- No utilizar agentes químicos corrosivos.
- Después de cada uso, limpiar la superficie con espuma en seco, paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol al 70 %.
- Dejar secar al aire libre (no al sol).
- Antes de guardar, aplicar talco sobre los vasos simulados para evitar humedad y hongos.
- Guardar en bolsa o caja protectora a temperatura ambiente, lejos del calor y la humedad.