



INSTRUCCIONES DE USO ACCESORIO PÉLVICO TÉRMICO

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El Accesorio Pélvico Térmico DAZZ es un dispositivo de silicona esterilizado y empaquetado en una bolsa de plástico herméticamente sellada para garantizar la seguridad y la efectividad de los modelos disponibles en www.bemamados.com.br.

PRODUTO DE USO INDIVIDUAL.

PRODUTO NO REGULADO POR ANVISA.

Composição DAZZ: 100% silicone para uso humano intracorpóreo.

Composição embalagem exterior: 100% PVC.

IMPORTADORA: Bemamados Ltda.
Comercial: Bemamados Ltda.

Av. Apoquinde, 29704-3904 - Las Comedias, São Paulo
São Paulo 099821916016@gmail.com

Marcas comerciais, Diseño Industrial, Patente Requerida Inventor: Tatiana Maciulis Dip.

DAZZ ES UN PRODUCTO DE BEMAMADOS / ATOBAS OVER SEAS

CNPJ 05.142.189/0001

ATOBAS OVER SEAS COMERCIAL DE PRODUTOS E CONSULTORIA EM INOVAÇÃO LTDA,

San Paulo Brasil

SAC www.bemamados.com.br


Móvil & Whats App: +55 11 9 3121-4000

Tatiana Maciulis Dip. tatiana@bemamados.com.br

SÃO PAULO, BRASIL

Contribuyeron a la preparación de este documento:
Eng. Tatiana Maciulis Dip, Inventor y creador del producto.
Dra. Fátima Regina Bazzuco Crefito 3/14486
Especialista en Fisioterapia Pélvica.

NOTAS: Lea las instrucciones de uso del dispositivo de fisioterapia pélvico o del dispositivo de fisioterapia.

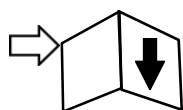

Lea ATENTAMENTE las Instrucciones de Uso del DAZZ Accesorio Pélvico Térmico.

Después de la lectura inicial, mantenga estas instrucciones de uso de este dispositivo para futuras consultas y;

Es un producto de uso único.

podem sofrer alterações sem prévio aviso ao usuário.

El Accesorio Pélvico Térmico de DAZZ es un dispositivo de silicona esterilizado y empaquetado en una bolsa de plástico herméticamente sellada para garantizar la seguridad y la efectividad de los modelos disponibles en www.bemamados.com.br.
por médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras, entre otros.
para:

- Reducir la incomodidad física durante las relaciones sexuales.
- Ayudar a la relajación muscular y la sensibilidad durante las relaciones sexuales.
- Variar los tratamientos de fisioterapia.
- Vaginismo (incapacidad para el examen ginecológico debido a la involuntaria contracción muscular).
- Dispareunia (dolor durante la penetración).
- Promover la desensibilización.
- Superar el miedo a la penetración.
- Endometriosis: problemas de salud sexual y vaginal.
- Vulvodinia: ardor en la vagina.
- Insuficiencia ginecológica: Canal vaginal acortado o estrecho.
- Amalgamados: cirugía ginecológica.
- Tratamientos pre y postparto.
- Dolor pélvico (endometriosis, entre otros).
- Otros menstruales.
- Estenosis vaginal: reducción del estrechamiento y vaginismo como resultado de la radioterapia.
- Recupera la elasticidad y la lubricación tras la cirugía de estrechamiento y / o acortamiento.
- Previene adherencias y fibrosis.
- Dar flexibilidad al tejido vaginal.
- Atrofia vulvar y vaginal.
- Dificultad para rasgar el tejido vaginal.
- Endometriosis: síndrome caracterizado por la presencia de tejido endometrial fuera del útero.
- Permisión de uso de tampón.
- Profilaxis vaginal.
- Facilitar la realización de ejercicios como Papanicolaou y ecografía.
- Agnasia de Neayagina, (constricción del canal vaginal).
- Reasignación de sexo postoperatorio.
- Otras afecciones que requieren tratamiento.

Recomendamos que el uso de
bajo la guía de un paciente
de uso del dilatador usear
según las necesidades clí

4 ADVERTENCIAS

Deben observarse las
durante el uso del producto té
DAZZ.

1. Después de abrir el pa
encarecidamente esteril

2. Se recomienda utilizar
lubricante vaginal ade
deslizamiento, además
intercambio térmico co

3. Por selección de las lesiones.
pélvica. A través de diferentes durezas, también permite
fortalecimiento de la musculatura pélvica a través de
ejercicios guiados por el fisioterapeuta pélvico o por un
calificado. formaldehído, hipocloro
aromáticos, ácidos inor

4. No usar en la cavidad uterina local ya q
su efecto es aumentar la circulación sanguínea (vasodilatación). Cuando se asocia a la disfunción de la vejiga
especialmente de las agudo o crónico, indeterminad
posparto, entre otros, busca ser un constituyente observado en el
el edema local y el dolor. El uso de este accesorio de termo DAZZ
término Dazz, debidamente guiado en los procedimientos terapéuticos, acelerando el proceso de relajación de flexión
un producto nuevo y des
materializado de este tipo de producto.

6. Antes de utilizar el pro
a un profesional esp
comprobar si hay algo q
de forma prioritaria a
tratamiento con el acce

7. Outra pessoa.

5 PRECAUCIONES

1. Deben observarse las sigui

2. Para el uso del accesorio de termo DAZZ

3. Siempre un profes

4. Antes, incluso antes de usar el accesorio de termo DAZZ

5. Siempre las instru

6. Utilizar el producto po

7. Estreitamente las instru

8. Mantenga siempre el produ

9. Con diciones.

10. Para garantizar la integ

11. producto, no lo exponga

12. esterilización (superiore

13. de este producto p

RESULTADOS POTENCIADORES:

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

ACCESORIO PÉLVICO TÉRMICO

percepción, estiramiento de la pared de la cavidad pélvica. A través de diferentes durezas, también permite
fortalecimiento de la musculatura pélvica a través de
ejercicios guiados por el fisioterapeuta pélvico o por un
calificado.

Cuando se usa junto con la acción de la ca l o q u e se usa para tratar la disfunción de la vejiga local ya q
comienza a tener una función antidiarrea. El uso de este accesorio de termo DAZZ
su efecto es aumentar la circulación sanguínea (vasodilatación). Cuando se asocia a la disfunción de la vejiga
(vasodilatación). Cuando se asocia a la disfunción de la vejiga
especialmente de las agudo o crónico, indeterminad
posparto, entre otros, busca ser un constituyente observado en el
el edema local y el dolor. El uso de este accesorio de termo DAZZ
término Dazz, debidamente guiado en los procedimientos terapéuticos, acelerando el proceso de relajación de flexión
terapéuticos, acelerando el proceso de relajación de flexión

Busca siempre un profesional especializado de este tipo de producto.

3 CONTRAINDICACIONES

Nunca use el accesorio pélvico DAZZ.
No exceda los límites de su cuerpo. Mantenga
las molestias al mínimo.

Hasta la fecha, no tenemos informes de contraindicaciones para este producto.

EMBARGO, SE RECOMIENDA para el uso del accesorio de termo DAZZ

DIABÉTICOS OTRAS PERSONAS QUE

TIENEN PÉRDIDA PARCIAL O total de la función de la vejiga

SENSIBILIDAD A LA TEMPERATURA de este producto

principalmente debido a neuropatías de la vejiga

SE UTILICE EL PRODUCTO, siempre las instru

SIEMPRE TEM MONITOREO DE utilizar el producto po

TEMPERATURA JUNTO CON UN estrictamente las instru

PROFESIONAL DE ACOMPañAR AL Mantenga siempre el produ

PACIENTE DURANTE EL USO del producto

PRODUCTO EVITANDO EMADURAS 4. Para garantizar la integ

TANTO DE CALOR COMO producto, no lo exponga

DE FRÍO esterilización (superiore

En casos de sospecha de infección de la cavidad pélvica o de la vejiga local ya q

síntomas inusuales, consulte al urólogo o al ginecólogo, y consulte con el urólogo o al ginecólogo

ginecólogo, y consulte con el urólogo o al ginecólogo de la salud, incluido el urólogo o al ginecólogo

de la salud, incluido el urólogo o al ginecólogo de la salud, incluido el urólogo o al ginecólogo

momento adecuado para iniciar el uso del accesorio de termo DAZZ

el accesorio de termo DAZZ. Evite el uso de acceso rio pélvico de este producto

inmediatamente después de DAZZ de este producto p

excepto cuando lo recomiende www.bemamapst.com.br

En caso de sangrado fuera del perímetro de la vejiga o de la cavidad pélvica o de la vejiga local ya q

suspenda su uso y busque atención médica al uso del p

6 INSTRUCCIONES DE USO RESFRIADO:

Con la ayuda de hielo

Las instrucciones de uso aquí ya consideran que el producto está limpio, desinfectado y listo para su uso.

Si sigue estas pautas, obtendrá el máximo beneficio de su accesorio térmico DAZZ. Después de un cierto período de uso, puede necesitar cambiar el modelo y / o la tapa para reemplazarlo por uno nuevo. Consulte las instrucciones para referencia posterior.

PARA ABRIR LA CUBIERTA: Levante el cuerpo del accesorio cerca de la tapa hacia arriba y continúe la

1. Coloque el hielo triturado en el interior del DAZZ.
2. Abra la tapa del accesorio.
3. Coloque el DAZZ en la zona de aplicación.
4. Una vez aprobada la temperatura vaginal a base de agua por

B CALOR:


Com auxílio de água

accesorio pélvico.
5. Introducir el accesorio en el interior Y CORRECTAMENTE VIA VAGINAL y sin forzar, lentamente. Déjelo en reposo o asociado con ejercicios de suelo pélvico, según las indicaciones de un profesional de la


La B1. Es necesario estar de acuerdo con el uso del producto.

1. Obtenga agua potable adecuada (recomendamos entrar bajo la supervisión de un profesional).
2. Compruebe la temperatura del agua caliente en el interior del DAZZ.
3. Una vez aprobada la temperatura vaginal a base de agua por

2. Abra la tapa del accesorio.
3. Coloque el DAZZ en la zona de aplicación.
4. Una vez aprobada la temperatura vaginal a base de agua por

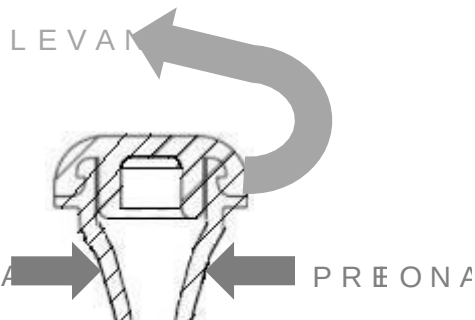

PARA VERIFICAR QUE LA TAPA ESTÁ BIEN CERRADA: Presione ligeramente el producto y verifique que no haya flujo de líquido o hinchazón.

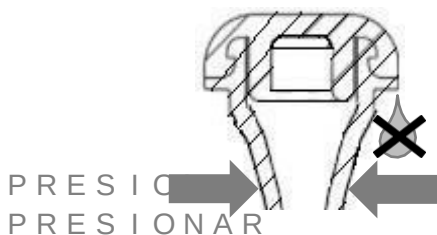

LAS MEJORES POSICIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO SON:

- A) acostado en decúbito supino (sobre el colchón), con ambas piernas semiflexionadas;
- B) acostado en decúbito dorsal (sobre el colchón) con ambas piernas semiflexionadas;
- C) acostado en decúbito lateral (sobre el colchón) con ambas piernas semiflexionadas;
- D) acostado en decúbito lateral (sobre el colchón) con una pierna semiflexionada y la otra extendida.

B5. Introducir el DAZZ Dilator (ya debe estar siempre correctamente LUBRICADO) VÍA vaginal, es siempre de alto nivel de sin forzar, preferiblemente LENTAMENTE. Instrucciones de B6. Deje reposar durante 30 minutos la efectividad de los productos de ejercicios de relajación y continúe con los ejercicios de relajación y según las indicaciones de su profesional de la salud. jabón y secar con un paño

7 LIMPIEZA E ESTERILIZACIÓN

USO DOMÉSTICO:

1. La rutina de desinfección describe a continuación debe realizarse obligatoriamente tanto en el caso de uso como siempre que se vaya a reutilizar el producto, siendo lo más recomendable siempre que sea posible.
2. Saque el producto del empaque original y, si es necesario, donde se guarda profesional de la salud y p
3. Para limpiarlo, lave el Accesorio DAZZ a fondo con agua y detergente o jabón. Enjuague bien con agua y asegure la esterilización cortando todo el detergente o jabón. El producto debe cumplir con los requisitos de la OMS y la ISO 9001.
4. Desinfecte con agua hirviendo el producto durante 20 minutos.
5. DESINFECCIÓN CON AGUA HIRVIENDO Pélvico Térmico DAZZ (DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL)

Tiempo total: 30 minutos.

5. Hervir el agua en un recipiente adecuado y colocar el Accesorio DAZZ para este procedimiento. Sin la presencia del DAZZ, las concentraciones de los
5. Pasados estos 10 minutos en un ambiente limpio, sumerja el DAZZ y deje hervir el agua durante otros 20 minutos, con la tapa abierta y asegurando que el agua penetre en toda la cavidad del cuerpo del Accesorio DAZZ.
5. Utilice pinzas desinfectadas para retirar el Accesorio DAZZ del agua hirviendo.
5. Colocar sobre un paño de algodón estéril y secar con un paño suave y planchado a temperatura de 120°C.
5. Seque o espere a que se seque completamente. Limpio y guárdelo completamente en un ambiente seco y limpio de baño si no se usa de inmediato.

NOTA 1: recomendar la fecha de vencimiento que no exceda los 5 días calendario de almacenamiento. Antes de su uso, asegure la esterilización del producto hirviendo justo antes de utilizarlo.

NOTA 2: el producto es hecho de plástico de alta calidad de médico. Viene no esterilizado y los productos de transporte están controladas, pero siempre existe el riesgo de contaminación. Antes de su uso, asegure la esterilización del producto hirviendo de acuerdo con esta

8 MANEJO Y ALMACENAMIENTO
El producto debe ser almacenado en un lugar seco y limpio, a temperatura ambiente. Siempre que sea necesario, lavar bien y secar antes de su uso. Antes de su uso, asegure la esterilización del producto hirviendo justo antes de utilizarlo.

9 REVISAR EL HISTORIAL
VER 3.1.0 05/2021 22
VER 3.1.0 05/2021 22