

TEST DE COPA 6 DROGAS EN ORINA

La copa de prueba multi-droga proporciona resultados precisos y rápidos en solo 5 minutos, utilizando una mezcla de anticuerpos para identificar selectivamente las drogas y sus metabolitos en muestras de prueba con alta sensibilidad. Es una alternativa inteligente a los laboratorios. Ofrece una precisión que varía entre 95 a 99% dependiendo del medicamento individual. Es un método popular para la detección inmediata de drogas de abuso.



Contenedor	INVOLABLE
Detección	6 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / BZO / AMP / OPI / MET
Requisito Operación	Inmediato
Almacenamiento	Período Prolongado
Control Temperatura	Si
Sellado	Hermético
Control de adulterante	Si


Nombre Droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml	Tiempo de detección		Precisión	%
			Mínimo	Máximo		
COCAINA	COC	150	4 Horas	24-48 Horas	SENSIBILIDAD	98,30%
					ESPECIFICIDAD	97,00%
MARIHUANA	THC	50	2-56 Horas	3-10 Días	SENSIBILIDAD	97,90%
					ESPECIFICIDAD	98,10%
ANFETAMINAS	AMP	500	2 Horas	24 Horas	SENSIBILIDAD	99,10%
					ESPECIFICIDAD	98,50%
BENZODIAZEPINAS	BZO	200	2 Horas	3-7 Días	SENSIBILIDAD	98,40%
					ESPECIFICIDAD	99,20%
OPIÁCEOS	OPI	2.000	2 Horas	4 Días	SENSIBILIDAD	96,70%
					ESPECIFICIDAD	93,80%
METANFETAMINAS	MET	500	2-24 Horas	3-5 Días	SENSIBILIDAD	97,60%
					ESPECIFICIDAD	97,00%



TEST DE COPA 6 DROGAS EN ORINA

CONTROL DE ADULTERANTE

La adulteración es la manipulación de una muestra de orina con la intención de alterar los resultados. El uso de adulterantes o dilución de la muestra puede causar resultados falsos negativos en las pruebas de drogas. Para detectar la adulteración se emplean los controles de adulterantes que determinan características de la orina como pH, la gravedad específica y la creatinina y para detectar la presencia de oxidantes / PCC, nitritos o glutaraldehído en la orina.

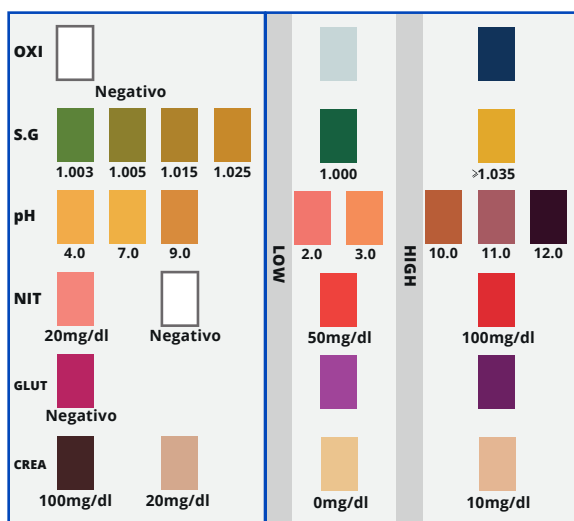

Uso laboral
CONTROL DE ADULTERANTE



NORMAL ANORMAL

USO

Permita que el dispositivo de prueba, la muestra y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C).



Detección de drogas de un máximo hasta 7 días.



TEST DE COPA 6 DROGAS EN ORINA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NEGATIVO: Aparecen líneas de color en la región de Control (C) y en la región del test (T). Este resultado negativo indica que la concentración de la droga particular analizada en la muestra de orina está por debajo del valor del cut-off para la droga de que se trate.



NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

POSITIVO: Sólo aparece una línea de color en la región de Control (C) y NO aparece línea de color en la región del test (T). El resultado positivo indica que la concentración de la droga en la muestra de orina es superior al valor del cut-off específico de esa droga.



INVÁLIDO: No aparece línea de color en la región de Control (C). Las razones más comunes para la ausencia de la línea de color en la región de Control son insuficiente volumen de muestra o un procedimiento aplicado incorrectamente. Leer las instrucciones de nuevo y repetir la prueba empleando un nuevo test. Si el resultado continua siendo inválido, contactar con el fabricante.

