

FICHA TÉCNICA

Rev. Agosto 2024

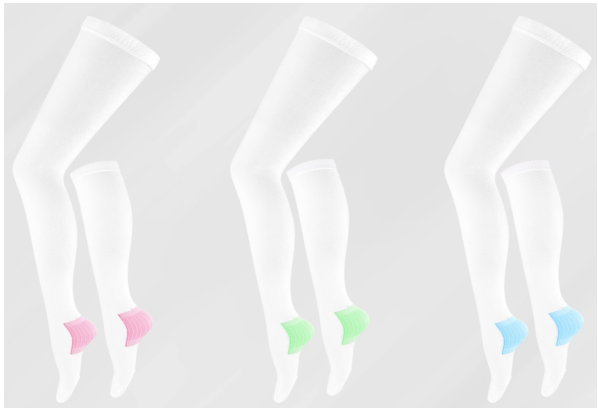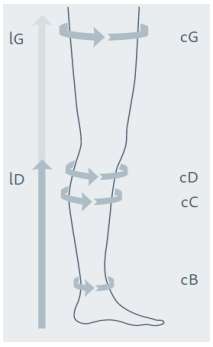

Nombre del Producto	**MEDIA TVP ANTIEMBOLIA TROMBIMED 18**
Código	E-701 (muslo) - E-702 (calceta)
Marca	TROMBIMED
Origen	Turquía
Descripción	Media antiembólica de compresión graduada, que optimiza el retorno venoso de la sangre mediante una disminución progresiva de la presión de compresión (compresión en gradiente), comenzando desde el tobillo (18 mmHg) y descendiendo hasta el muslo (8 mmHg). Producto elaborado en textil elasticado bidireccional. Se adapta a la anatomía del usuario.
Indicaciones	En la profilaxis física de la trombosis venosa profunda. En forma profiláctica para personas que deben permanecer tiempo prolongado en cama o son sometidas a procedimientos quirúrgicos prolongados y de riesgo. En pacientes que guardan reposo en cama y pacientes con limitación de movimiento. Durante operaciones y en el post operatorio. Evita la estasis venosa, mejora el retorno venoso, uso antes y después de cirugías, reduce de manera considerable la probabilidad de desarrollar Trombosis Venosa Profunda (TVP).
Más información	
Contiene Látex	No

Beneficios	**Abertura de inspección: con borde de goma, que evita el deslizamiento del pie.** Proporciona un control permanente de la situación del riesgo sanguíneo, sin tener que quitarse la media. Permite descubrir rápidamente cualquier cambio de color, que suele ser un indicio de un problema arterial, y adoptar enseguida las medidas pertinentes. Además, facilita la higiene de los dedos. Previniendo la proliferación de bacterias y formación de micosis. **No crea compresión en hueco poplíteo.**
	Talón en 3D: Reforzado y que ayuda a identificar la posición correcta de la media. Talonera blanda y esponjosa, que protege la zona del talón, evitando cualquier posible cizallamiento. El material de alta capilaridad elimina la humedad de la piel, evitando que se macere (reblandecimiento de la piel) la zona. Así se evitan definitivamente las úlceras por decúbito del talón. **Antideslizante:** banda superior de silicona que la ajusta al muslo y evita que se mueva.
	Marca de colores: Area del talón en diferentes colores, indican la talla de la media, facilitando su elección al momento de la instalación. **Marca de Talón:** La marca en el talón sirve para colocar correctamente la media en la zona del pie. **Libre de Látex** **Envase con sello hermetico que** asegura la inviolabilidad del contenido. **Cada envase tiene el color de la talla** correspondiente para verificación de la talla correcta.
Tabla de medidas	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es una medición correcta. El contorno de tobillo (cB) determina la talla que se debe seleccionar. En las medias hasta la rodilla, se elije la talla midiendo el perímetro de la pantorrilla (cC). En las medias hasta el muslo, se elije la talla midiendo el perímetro del muslo (cG). Para un mejor manejo y legibilidad, las dimensiones se indican en centímetros enteros. Los posibles intervalos entre medidas, quedan cubiertos por las tolerancias de medición y fabricación. Al determinar la talla, se aplican las reglas internacionales de redondeo (redondeo a la baja hasta 4/10, redondeo al alza a partir de 5/10). Esto se ha tenido en cuenta al diseñar la cinta métrica Blunding.

Circunferencia (CM)	**Medida**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Topband (AG) 	**cB**– C. de tobillo	20 – 22	23 – 25	26 – 28	29 – 31	32–34
	cC– C. de Pantorrilla	30 – 38	34 – 46	38 – 48	42 – 52	46 –56
	cD– C. debajo Rodilla	29 – 41	33 – 45	37 – 50	41 – 54	41 – 54
	cG–C. Muslo	48 – 60	56 – 70	64 – 80	72 – 90	80 – 100
	lG (AG)– Largo Desde G al suelo	65 – 89	65 – 89	65 – 89	65 – 89	65 – 89
	Código color Talón	**Magenta**	**Verde**	**Calipso**	**Naranja**	**Gris**
Composición	82% Poliamida 18% Elastano					
Peso del producto (g)	68–92					

Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	20 x 26 x 0,4
Color	Blanco + Otros colores en el talón dependiendo de la talla.

Código de barra

SKU	Presentacion	Talla	Código de Barra
E-701S	Par; en bolsa individual	S	7801001016617
E-701M	Par; en bolsa individual	M	7801001016624
E-701L	Par; en bolsa individual	L	7801001016631
E-701XL	Par; en bolsa individual	XL	7801001016648
E-7012XL	Par; en bolsa individual	XXL	7801001016655
E-702S	Par; en bolsa individual	S	7801001017157
E-702M	Par; en bolsa individual	M	7801001017164
E-702L	Par; en bolsa individual	L	7801001017171
E-702XL	Par; en bolsa individual	XL	7801001017188

Mantención de Producto

Lavar a mano con detergente suave.

El lavado debe ejecutarse siguiendo las recomendaciones de la Directiva para Dispositivos Médicos para productos sanitarios pertinentes y los requisitos que se apliquen a nivel nacional, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

• Lavado hasta 60°C

• No utilizar lejía

• No planchar

• No utilizar limpieza química

Las medias de compresión dañadas (puntos corridos) se deben eliminar y no pueden seguir utilizándose.

El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.

Garantía

Este producto tienen una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses).

Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero ò sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original.

Certificación y Registros