
FICHA TÉCNICA
Rev. Febrero 2025

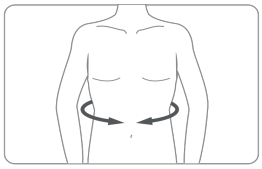

Nombre del Producto	**FAJA DORSOLUMBAR DR. SLIM**
Código	DR02
Marca	Dr Slim
Fabricante	Blunding
Descripción	La DR02, es un soporte ortopedico con elementos de sujeción integrados, asas, que ofrece un alivio notable para la zona dorsolumbar y un apoyo para los músculos de la espalda. Producto de efecto estabilizador y aliviador en la columna lumbar sin afectar la fuerza muscular. Su estructura de ajuste perfecto, es altamente elásticada, transpirable y absorbe la humedad. Sus suaves y confortables bandas elasticas de tejido plano, reducen la tensión muscular y garantizan comodidad durante todo el día. Las varillas dorsales integradas garantizan un ajuste perfecto. Producto anatomicamente diseñado de facil ajuste individual. Este producto puede usarse todo el día y se recomienda qiutarselos para descansos más largos (por ejemplo, sentarse durante mucho tiempo o un largo viaje en coche, dormir).
Indicaciones	Estabilización de la región lumbar En contracturas de la musculatura dorsal Dolor dorsal crónico o agudo Lesiones deportivas en la región dorsal En enfermedades degenerativas de la columna Escoliosis Cifosis Lordosis Postura incorrecta
Más información	
Contiene Látex	No

Componentes	1 UN faja dorsolumbar 1 UN Envase con instrucciones de uso en español
Beneficios	**Diseño anatómico:** La faja está diseñada para ajustarse cómodamente a la forma natural de la columna vertebral, proporcionando un soporte óptimo y evitando restricciones en el movimiento. **Materiales ligeros y transpirables:** Está fabricada con materiales que ayudan a mantener la comodidad y la frescura durante el uso prolongado. **Cinturón ajustable**: La faja cuenta con un cinturón ajustable que permite personalizar el ajuste según las necesidades individuales del usuario. **Refuerzos laterales:** Los refuerzos laterales proporcionan una mayor estabilidad y soporte a la región lumbar y dorsal.

Tabla de medidas 	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es una medición correcta. Con ayuda de una cinta métrica flexible, mida el contorno de la cintura, el resultado determina la talla que se debe seleccionar. En caso, que su medida supere lo indicado por el segmento definido, por favor redondee a la siguiente talla.			
Contorno de la cintura (cm)	**Small**	**Medium**	**Large**	**Extra Large**
	77-93	94-101	102-121	122-130
Composición	79% Poliéster / 12% Elastano / 9% Poliamida; 100% Polipropileno; 100% Nylon			
Peso del producto (g)	404			
Alto / Ancho / Largo envase (cm)	8 X 13 X 31			
Color	Blanco ó Beige			

Código de barra

SKU	Talla / Color	Código de Barra
DR02S	S / Blanco	7801001002566
DR02M	M/ Blanco	7801001002573
DR02L	L / Blanco	7801001002580
DR02XL	XL/ Blanco	7801001002597
DR02BS	S/ Beige	7801001017669
DR02BM	M/ Beige	7801001017652
DR02BL	L/ Beige	7801001017645
DR02BXL	XL/ Beige	7801001017676

Mantención de Producto

Lavar a mano con agua tibia (máx. 30°C) y jabón neutro.
Pase sobre el velcro un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de lavar, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe la prenda.
Cada vez antes de usarlo:
Revisar la integridad de las partes y piezas del producto (elástico, costuras).
Detallar si existe algún tipo de desgaste y defectos.
No lo seque en la secadora.
Para el secado del producto, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjelo secar a temperatura ambiente.
Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.
No lo tienda ni lo planche y no lo exponga a fuentes de calor directas como estufas, secadoras, exposición directa al sol, etc.
El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.
Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores. Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

Certificación y Registros