FICHA TÉCNICA

Rev. Febrero 2025





Nombre del Producto	**FAJA ABDOMINAL DR. SLIM**
Código	DR04
Marca	Dr Slim
Fabricante	Blunding

Descripción

Soporte sacrolumbar y abdominal, de diseño envolvente que se ajusta, en la parte anterior, con ayuda de cierres de contacto.Cuatro paneles de elástico afelpado, de alta calidad, y libres de látex, se unen a un panel frontal acolchado, recubierto en algodón muy suave, que protege la delicada piel del paciente. Este producto, contribuye a que las incisiones se mantengan limpias durante las primeras etapas del proceso de recuperación médica, mitigando así el riesgo de infección post cirugía. Producto libre de látex, que garantiza una excelente transpirabilidad y comodidad, incluso cuando el paciente, usa el soporte por períodos de tiempo prolongados.

Indicaciones

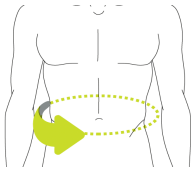
En el postoperatorio de cirugías abdominales
En hernias abdominales
En pacientes sometidos a abdominoplastias y liposucciones

Más información

Contiene Látex

No

Componentes	1 UN faja abdominal 1 UN Envase con instrucciones de uso en español
Beneficios	**SOPORTE Y FIJACIÓN:** Asegura los vendajes en su sitio, impidiendo su desplazamiento y asegurando que las incisiones se mantengan limpias durante las primeras etapas del proceso de recuperación. **MITIGA EL RIESGO DE INFLAMACION:** Este producto brinda soporte y compresión que disminuyen la usual inflamación postoperatoria. Comprime el espacio intercelular, impidiendo que el agua presente en la linfa y el plasma sanguíneo se almacenen, originando edemas o hinchazón.

Beneficios	**APOYA EL PROCESO DE CICATRIZACION:** Mitiga el riesgo que, durante el proceso de curación, la piel y tejidos se posicionen de manera irregular creando una apariencia desigual del tejido. **ACELERA LA RECUPERACIÓN:** Permite que el paciente se mantenga seguro, disminuyendo el riesgo de infecciones e incomodidad. **BUENA TRANSPIRABILIDAD:** El elástico libre de látex, suave y transpirable, puede sujetarse con cuidado a la piel desnuda sin irritación, picazón ni sobrecalentamiento. Mantiene su cuerpo fresco y cómodo. **MATERIAL DE ALTA CALIDAD:** Producto elaborado en elástico de alta calidad, libre de látex, estable y duradero. Material con buena elasticidad que mantiene el cuerpo fresco y cómodo, brindando estabilidad y sin restringir la función respiratoria normal o el ejercicio básico. **Fácil cierre de velcro y ajuste**. **Producto antideslizante**. No se desplaza hacia arriba, abajo o de un lado a otro, lo que le brinda más tranquilidad al usuario. **Discreto**, puede utilizarse debajo de la ropa sin ningún tipo de inconveniente. **Suave**, liviano, cómodo y delicado con la piel. La combinación de textiles que lo conforman asegura que no se generan erupciones, ni alergias. **Estética agradable**.
Tabla de medidas 	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es una medición correcta. Con ayuda de una cinta métrica flexible, mida el contorno de cadera, el resultado determina la talla que se debe seleccionar. En caso, que su medida supere lo indicado por el segmento definido, por favor redondee a la siguiente talla

Contorno de cadera (cm)	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
	< 90	90-100	100-110	110-135	135-145

Composición	79% Poliéster / 12% Elastano / 9% Poliamida; 100% Polipropileno; 100% Nylon
Peso del producto (g)	254
Alto / Ancho / Largo envase (cm)	15,5 X 20 x 7,5
Color faja	Blanco ó Beige

Código de barra

SKU	Talla / Color	Código de Barra
DR04S	S / Blanco	7801001002474
DR04M	M/ Blanco	7801001002481
DR04L	L / Blanco	7801001002498
DR04XL	XL/ Blanco	7801001002504
DR04XXL	XXL/ Blanco	7801001006854
DR04BS	S/ Beige	7801001017744
DR04BM	M/ Beige	7801001017737
DR04BL	L/ Beige	7801001017720
DR04BXL	XL/ Beige	7801001017751
DR04BXXL	XXL/ Beige	7801001017768

Mantención de Producto

Lavar a mano con agua tibia (máx. 30ºC) y jabón neutro.
Pase sobre el velcro un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de lavar, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe la prenda.
Cada vez antes de usarlo:
Revisar la integridad de las partes y piezas del producto (elástico, costuras).
Detallar si existe algún tipo de desgaste y defectos.
No lo seque en la secadora.
Para el secado del producto, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjelo secar a temperatura ambiente.
Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.
No lo tienda ni lo planche y no lo exponga a fuentes de calor directas como estufas, secadoras, exposición directa al sol, etc.
El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.
Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

Certificación y Registros del Sistema de Gestión de calidad

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 13485:2016 (N° 2023/SGMD.0069) e ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), registro del instituto nacional de salud pública N.º EDM 198/14 y registro FDA N.º 9104922.