FICHA TÉCNICA

Rev. Febrero 2024



Nombre del Producto	RODILLERA BAMBU
Código	BBE-03
Origen	Asia
Marca	Blunding

Descripción

La rodillera Blunding Sport Bamboo, BBE-03, es un vendaje tubular transpirable que se ajusta alrededor de la rodilla. Este producto proporciona soporte, estabilidad y protección. Además, ayuda a aliviar el dolor, reducir la inflamación y promueve una recuperación más rápida de lesiones. Esta fabricada con fibra de bambú, lo cual brinda al usuario una sensación de comodidad. Producto hipoalergénico, ideal para pieles sensibles y quienes requieren usar la pieza por periodos prolongados.

Indicaciones:

Prevención de lesiones en rodilla, como distensiones, torceduras, tendinitis, bursitis u otras,
Prevención de daños durante la práctica deportiva o actividades que puedan ejercer tensión sobre la articulación de la rodilla,
Apoyo durante la recuperación de una lesión.

Más información

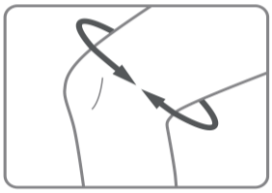
Contiene Látex

SI

Componentes

1 UN Rodillera Bambú
1 UN envase con instrucciones de uso en español

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 13485:2016 (N° 2023/SGMD.0069) e ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), registro del instituto nacional de salud pública N.º EDM 198/14 y registro FDA N.º 9104922.

Beneficios	**Ergonomía:** cuenta con un buen ajuste. **Suavidad:** producto flexible y ligero, que puede usarse durante períodos prolongados. **Transpirabilidad:** absorbe la humedad, manteniendo la piel seca y fresca. **Hipoalergénico:** es naturalmente resistente a los ácaros y al moho, adecuada para personas con piel sensible o alérgicas. **Termorregulador:** ayudan a regular la temperatura corporal, manteniéndola constante y proporcionando comodidad.				
Tabla de medidas	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es usar la talla correcta. La talla que debe seleccionar lo determina el contorno de la rodilla. Para un mejor manejo y legibilidad, las dimensiones se indican en centímetros enteros. Los posibles intervalos entre medidas quedan cubiertos por las tolerancias de medición y fabricación. Al determinar la talla, se aplican las reglas internacionales de redondeo (redondeo a la baja hasta 4/10, redondeo al alza a partir de 5/10). Esto se ha tenido en cuenta al diseñar la cinta métrica Blunding.				
Contorno (cm)	**Medidas**	**S**	**M**	**L**	**XL**
	Contorno de la rodilla (cm)	30-34	35-39	40-43	> 44
Unidad de Empaque	**1 Unidad en una caja**		**44 Unidades en una caja**		
Alto / Ancho / Largo Unidad de Empaque (Cm)	13 x 9 X 3,3		27,5 X 27,5 X 30,5		
Peso (g)	90		4.100		
Composición	40% Fibra de bambú 35% Nylon 25% Látex				
Color	Plata				

Código de barra

CODIGO	PRODUCTO	EAN 13
BBE-03S	RODILLERA BAMBU S	7801001002986
BBE-03M	RODILLERA BAMBU M	7801001002993
BBE-03L	RODILLERA BAMBU L	7801001003006
BBE-03XL	RODILLERA BAMBU XL	7801001003013

Mantención de Producto

Se recomienda lavar a mano hasta 40° C de temperatura.

Utilizar detergentes para prendas delicadas.

No utilizar blanqueador o cloro.

No planchar.

Secado en máquina temperatura baja.

No utilizar limpieza química/lavado en seco

El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Este producto se ha diseñado y probado para uso individual y no se recomienda para el uso de varias personas. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con SAC Blunding.

Certificación y Registros del Sistema de Gestión de calidad