

Advantive®

CATÉTER PERIFÉRICO

INTRAVENOSO RADIOPACO
CORTO DESHECHABLE

Advantive. Viuret® y el símbolo EMV son
marcas registradas de Equipos Médicos Vizcarra.

Todos los catéteres periféricos intravenosos de
EMV, incluyendo **Advantive**, son fabricados
en cumplimiento con la norma internacional
referente a catéteres periféricos sobre la aguja
ISO 10555-5 2013.

Reg.No. 0736C2002 S.S.A.




- La punta transformada del catéter penetra muy fácil y suavemente las capas de la piel: epidermis, dermis y pared de la vena.

Viuret® es un Bio-material de poliuretano de
propiedad y de desarrollo de EMV

Advantive. Viuret® presenta un compuesto a base de poliuretano
que tiene la cualidad única de mantenerse firme para su inserción,
volviéndose suave al entrar en contacto con la sangre, minimizando
considerablemente el índice de flebitis por fricción mecánica.

Disponible en **Viuret®**
Bio-material de poliuretano

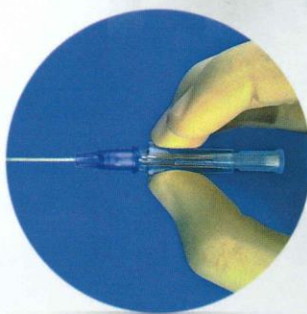

La aguja introductora está
unida en el otro extremo a
una amplia cámara visual
de flujo anatómicamente
diseñada que asegura:

- Visibilidad amplia y rápida de la primera señal sanguínea, que indica que el bisel de la aguja está en la vena.
- Sujeción firme, cómoda y controlada.
- Perfecto balance del peso del producto.
- Facilidad de la cateterización.
- Seguridad para el usuario que lo hace blando y se acomoda a la forma de la vena.





- **Viuret** Bio-material ofrece gran resistencia a la deformación en la punta del catéter (floreo).
- **Viuret** Bio-material no sufre arremangamiento sobre la aguja debido a su exclusivo compuesto de poliuretano, material de alta memoria.
- Una vez colocado en el interior de la vena, **Viuret** Bio-material sufre ligero calentamiento que lo hace blando y se acomoda a la forma de la vena.

Especificaciones del Producto

	Calibre	Longitud Cat. mm	Longitud Cat. Pulgadas	Calibre Aguja	Velocidad Flujo MI/min.	Código de pedido Viuret Poliuretano
○ Naranja	14 G	51	2	16 G	325	FPUR1451
○ Gris	16 G	51	2	18 G	207	FPUR1651
○ Verde	18 G	51	2	20 G	93	FPUR1851
○ Verde	18 G	32	1 ¼	20 G	105	FPUR1832
○ Rosa	20 G	51	2	22 G	53	FPUR2051
○ Rosa	20 G	32	1 ¼	22 G	60	FPUR2032
○ Azul	22 G	25	1	24 G	32	FPUR2225
○ Amarillo	24 G	20	3/4	26 G	18	FPUR2420
○ Amarillo	24 G	14	9/16	26 G	20	FPUR2414

NOTA: La intolerancia de un catéter periférico intravenoso está relacionada directamente con el poder irritante de las soluciones que se aplican.



Advantive, cuando es utilizado para aplicación de soluciones de bajo poder irritante, puede permanecer en uso hasta 72 horas, sin embargo, debe cambiarse el sitio de infusión en el momento en que se presenten signos de inflamación, (aumento de volumen, enrojecimiento o aumento de temperatura).

StandardLab

Calle Jesús García N°2794, Col. Prados Povidencia C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco.

Tel.: 33 3832 0808

Cel.: 33 2791 5042

