

Nombre del Producto **ABDUCTOR DE HOMBRO EN 15°**

Código HM134

Fabricante Chile

Marca Blunding

Descripción El HM134 de Blunding, es un soporte para la inmovilización del hombro que ayuda a mantener el brazo alejado del cuerpo en un ángulo de 15° (abducción), aliviando la tensión y proporcionando alivio inmediato. El cojín que forma su base, esta anatómicamente diseñado para posicionar, de forma segura y cómoda, la articulación.

Indicaciones Todas las indicaciones que requieran la inmovilización del hombro y su abducción en 15°:

- Post-reparación del manguito rotador;
- Fracturas de la cabeza humeral (no quirúrgicas, postoperatorias);
- Después de la inserción de una prótesis de hombro;
- Después de la estabilización de las luxaciones de la articulación acromioclavicular;
- Después de la tenodesis del bíceps;
- Síndrome de pinzamiento (no quirúrgico, postoperatorio)


Más información



Contiene Látex No

Componentes	1 UN abductor de hombro en 15° 1 UN Folleto Instrucciones de Uso en español Bolsa tela no tejida para fácil transporte
--------------------	--

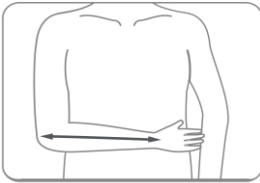

Beneficios	Cómodo: Producto fácil de abrir, lo que facilita el seguimiento funcional temprano, como la fisioterapia. Elaborado en materiales acolchados de alta calidad, y de textiles transpirables. Simple de usar: El usuario puede ponerse y quitarse el producto sin ayuda de terceros. Ergonómico: tanto su base como otros componentes de posicionamiento hacen que el producto sea muy fácil de manejar. Ambidiestro: Producto fácil de modificar. Puede usarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho.				
Tabla de medidas	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es usar la talla correcta. La talla que debe seleccionar lo determina el largo desde codo a nudillos, del paciente. Para un mejor manejo y legibilidad, las dimensiones se indican en centímetros enteros. Los posibles intervalos entre medidas, quedan cubiertos por las tolerancias de medición y fabricación. Al determinar la talla, se aplican las reglas internacionales de redondeo (redondeo a la baja hasta 4/10, redondeo al alza a partir de 5/10). Esto se ha tenido en cuenta al diseñar la cinta métrica Blunding.				
Largo en Cms	Medidas	Small	Medium	Large	
	Largo desde codo a nudillos (cm)	Hasta 34	35-39	Más de 39	
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	Bolsa tela no tejida: 20cm alto x 50cm ancho x 17cm fondo				
Peso (g)	400				
Composición	Cara Externa: 100% Velour Poliéster Cara Interna: 100% Algodón Corte de Espuma: 100% Poliuretano Bandas: 100% Algodón Hebillas: 100% Polipropileno Cierre de Contacto: 100% Nylon				
Color	Gris				

Código de barra	SKU	Talla	Código de Barra
	HM13400S	S	7801001008728
	HM13400M	M	7801001008735
	HM13400L	L	7801001008742

Mantenición de Producto	Al menos una vez cada semana, si lo usa a diario, o con mayor frecuencia, si el uso es más esporádico revisar la integridad de las partes y piezas del producto (costuras, velcros, integridad de los textiles) para detallar si existe algún tipo de desgaste.
	Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas. En estos casos, se recomienda pasar sobre el velcro un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial.
	Lavado manual hasta 40 °C
	No lavar con lejía
	No planchar
	No utilizar limpieza química/lavado en seco
	El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398, sobre protección de los derechos de los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. Este dispositivo médico está diseñado exclusivamente para su uso individual en un paciente. En caso de utilizarse para tratar a más de un paciente, la responsabilidad del fabricante respecto al producto queda anulada. Si experimenta un dolor excesivo o malestar al utilizar el producto, retírelo y consulte a su médico o especialista de inmediato. Aplique el producto únicamente sobre piel intacta o curada, evitando su aplicación directa sobre piel lesionada o dañada, y siempre siguiendo las indicaciones médicas. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del manual de instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros del Sistema de Gestión de calidad

